

# ZOLL AED 3™

## TRAINER



## Instructions de mise à niveau du logiciel



**ZOLL Medical Corporation**  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA, États-Unis  
01824-4105

À l'attention de : Service technique de maintenance

Tél. : 978-421-9655      800-348-9011  
Télécopie : 978-421-0001




**ZOLL International Holding B.V.**  
Newtonweg 18  
6662 PV ELST  
Pays-Bas

Tél. : +31 (0) 481 366410  
Télécopie : +31 (0) 481 366411

International : Contacter votre représentant local.

© 2018 ZOLL Medical Corporation  
UTILISATION RÉSERVÉE À DES FINS DE FORMATION – NON PRÉVU POUR UNE UTILISATION CLINIQUE


- (1) Vérifiez que le boîtier d'apprentissage ZOLL AED 3 est ÉTEINT et que l'électrode CPR Uni-padz™ est déconnectée.

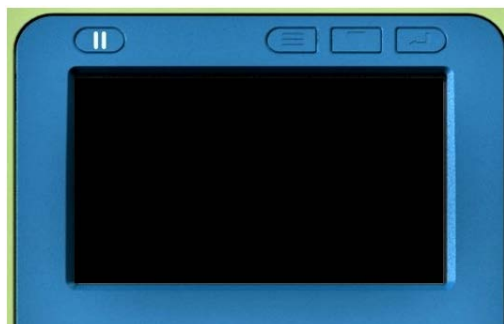


- (2) Lorsque l'appareil est ÉTEINT, insérez la clé dans le port USB.



- (3) Appuyez sur le bouton de sélection du menu de configuration du dispositif pour ALLUMER l'appareil.

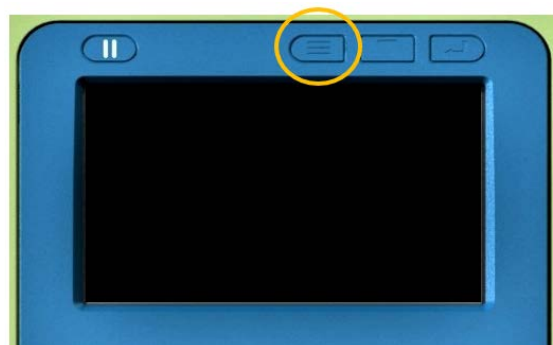


- (4) Appuyez plusieurs fois sur le bouton de défilement du menu de configuration du dispositif pour défiler jusqu'à la **mise à jour du logiciel**

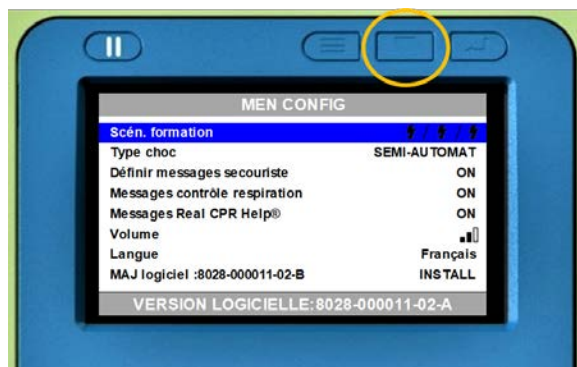


- (5) Confirmez que la version de la « **MAJ logiciel** » correspond à la version prévue sur la clé USB.
- (6) Appuyez sur le bouton de sélection d'option de configuration du dispositif pour **INSTALLER** la mise à jour du logiciel.



- (7) Lors de l'installation, une barre de progression apparaît et affiche la progression de la mise à jour du logiciel.

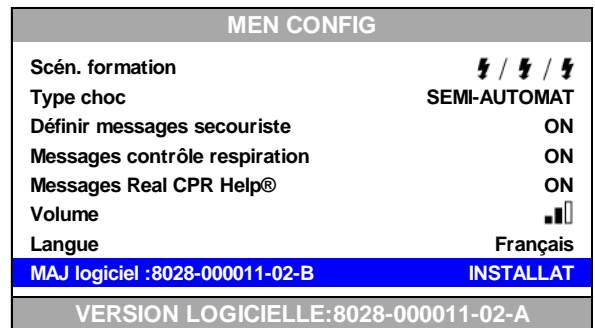

- (8) Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le boîtier d'apprentissage affiche le message **TERMINÉ(E)**.

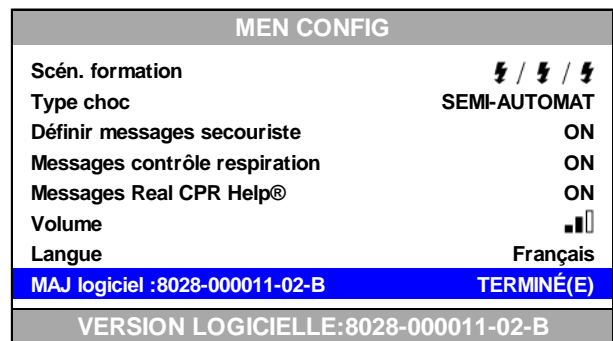

- (9) En cas d'échec de la mise à jour du logiciel pour une raison quelconque, le boîtier d'apprentissage affiche le message **ÉCHEC**. Si ce message s'affiche, retirez la clé USB, mettez le boîtier d'apprentissage hors tension et réessayez la mise à jour du logiciel. Si le message s'affiche de nouveau après la deuxième tentative, veuillez contacter le service technique ZOLL ou votre associé local ZOLL.

